



Selbstklebende Elektroden Self-adhesive electrodes




Größe/size: 40 x 40 mm
Artikel-Nr./item no.: 46501
Inhalt/content: 4 Stück/pieces

Lot Nr.: B191205
Exp. Date: 2023-04-30



4



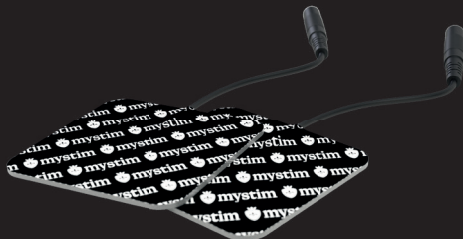

Selbstklebende Elektroden

Größe: 40 x 40 mm. 2 mm Stecker | Artikel-Nr.: 46501 | Inhalt: 4 Stück

Anwendungshinweise

1. Verbinde die Kabel mit den Elektroden.
2. Zieh' die Elektroden von der Schutzfolie ab und klebe sie auf deine Haut. Diese sollte sauber, trocken und unverletzt sein. Um gleichmäßigen Kontakt mit der Haut zu gewährleisten, solltest du die Elektroden fest andrücken.
3. Verbinde das Kabel mit deinem Elektrostimulationsgerät.

Pflege und Aufbewahrung

Heb' die Elektrode an einer Ecke an und zieh' sie NICHT am Kabel von der Haut ab. Kleb' die Elektroden wieder auf die Schutzfolie und bewahre sie in der wiederverschließbaren Verpackung an einem kühlen Ort auf (z. B. im Kühlschrank). Ziehe NICHT an den angeschlossenen Kabeln, wenn die Elektroden von der Schutzfolie oder von der Haut abgezogen werden. Andernfalls können die Elektroden beschädigt werden. Wenn die Elektroden irgendwann nicht mehr richtig kleben, gib bitte einen Tropfen Leitungswasser auf die Klebefläche. Wenn auch das nicht mehr hilft, ist es an der Zeit für eine neue Elektrode.

Warnhinweis

Bei Hautirritationen beende bitte die Anwendung und konsultiere deinen Arzt.

Self-adhesive electrodes

size: 40 x 40 mm, 2 mm plug | item no: 46501 | content: 4 pieces

Usage instructions

1. Connect the wire with the electrodes.
2. Take the electrodes off of the protection foil and attach them to clean, dry and unirritated skin. Press them on tightly, to make sure the electrodes have continuous skin contact.
3. Now link the wire to your electrostimulator.

Maintenance and storage

Please lift up the electrode at one corner and do NOT pull at the wire to remove the electrode from your skin. Now re-attach the electrodes to the protection foil and keep them in the re-usable package at a cool place (e. g. in the refrigerator). You are NOT supposed to pull at the attached wire in order to remove the electrodes neither from the protection foil nor from skin. This may cause damage of the electrodes. Some water should be dropped on the sticky side of the electrodes in case of re-using them. The electrodes should be thrown away if they do not adhere any longer. The electrodes should not be exposed to pressure.

Caution

Usage should be stopped immediately in case of skin irritation. Please ask your doctor for medical advice.